

2019年8月1日(木)から

DNAシーケンス 受託 バイク便によるサンプル回収サービス スタート!

14時半までのご注文で当日集荷、最短翌営業日に解析結果をお届けします!

サンプル提出の
翌営業日PM~
解析結果がお手元に

Day1



*ご準備は16:00 までにお済ませ
になっておいてください



翌営業日AM着

大阪大学の研究者の皆様への特別なサービス

- 1本からバイク便でサンプル回収♪
もちろんは送料無料!
- 外箱も配送伝票も不要♪
ジッパー付き袋にサンプルと注文完了画面の印刷
を用意ください
- お部屋で待つだけ♪
バイク便ライダーがお部屋まで伺います!

キャンペーン価格

▼大阪大学 吹田キャンパスご所属のお客様限定 特別価格

キャンペーン期間:2019年 8月1日(木)回収分~2019年 9月27日(金)回収分

>>キャンペーン終了後はバイク便 特別価格を設定します。

Web注文画面の特記事項欄に初回は【阪大バイク SEQ1908011S】と必ず記載してください。

解析タイプ Value Read	受け入れサンプル	価格(税別)	サンプル提出後の納期 ※1
プライマー プレミックス	シングルチューブ(1.5ml)	通常¥800→ ¥500/解析	最短翌営業日 ~
	8連チューブ ★	通常¥580→ ¥400/解析 ★ 6解析分からご利用可	最短翌営業日 ~
	96ウェルプレート	通常¥350→ ¥300/解析 ※48解析分からご利用可	最短 +2営業日~

※1 輸送遅延、機械エラーなどにより再解析が必要となった場合は納期が遅れる場合がございます。また多サンプルの場合の納期は要問合せ。

詳しくは裏面をご覧ください

★8連タイプフォームの場合は 6 解析分 からの入力可。
価格例 7解析分の時:¥400×7(税別)

お問い合わせ

DNAシーケンス部門 TEL:03-5492-7253

E-mail:sequence-jp@eurofins.com

ユーロフィンジェノミクス株式会社 eurofinsgenomics.jp

DNAシーケンスサンプル調整

[対象商品 : Value Read 解析 プレミックス *]

* BigDye の混合は不要です。PCR産物はPCRプライマーや dNTP 除去のため、必ず精製してください。

サンプルは必ず電気泳動にて濃度をご確認ください (吸光度計での算出はお奨めいたしません)

「8連チューブ」は0.2mlの8連PCRチューブに、「シングルチューブ」は1.5mlチューブに調製をお願いいたします。

「96ウェルプレート」は「セミスカート付96穴PCRプレート(透明)」をご利用の上、必ず8連キャップにて密閉してください。

G12,H12のウェルは弊社でコントロール用に使用するためサンプルは入れないでください。A01はサンプルが必要です。

テンプレートと プライマーを混合し 計 21 μ L / 1反応 になるよう dH ₂ O で 調整	テンプレート	プラスミド	
		PCR 産物	
		150-200bp	3-9ng
		200-500bp	9-30ng
		500-1,000bp	15-60ng
		1,000-2,000bp	30-120ng
		>2,000bp	60-150ng
	プライマー	9.6pmol	


ご注文方法

ウェブ注文は**平日14:30まで**にお済ませください

eurofinsgenomics.jp

1 ユーロフィンジェノミクスのwebページでログイン
ご注文ボタンを押してください

※新規の方はご注文時にアカウントの登録が必要です。

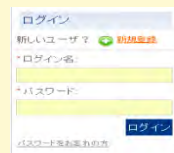

2 画面に従いサンプル情報を入力、[購入へ]に進んでください
※解析タイプ・サンプル形状にあったタブをご選択ください

3 サンプル回収サービスの**サンプル回収-当日 (Speed)**を選択※
初回のみ「**阪大バイク1908011S**」を特記事項欄に
記入してください ※サンプル回収不要には✓しないでください。

サンプルDNA回収サービス
解析サンプルの回収先住所を登録してください

☐ サンプル回収不要(ご自身で出荷手配の場合はチェックしてください)

回収サービスの設定
(Choose Pick-Up option)

回収希望日
(Desired Collection Date)

集荷希望時間帯
(Desired Collection Time)

☒ サンプル回収当日(Speed)


2016/01/03

16:00-17:00

次へ (Next)

4 注文完了画面を印刷し (※必須)、サンプルに同封

5 16時~17時にバイク便ライダーが集荷に伺います
※お時間の都合上、お部屋での待機はできかねますので、必ず**16時まで**に**サンプルの準備**
をお願いいたします
※サンプルの破損・液漏れが無いようにチューブの蓋をしっかりと締めた状態でご提出してください

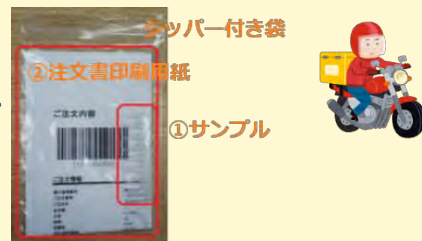

お問い合わせ・サンプル送付先

ユーロフィンジェノミクス株式会社 DNAシーケンス部門
〒143-0003 東京都大田区京浜島3-5-5 日通京浜島センター新棟2F
TEL: 03-5492-7253 Email: sequence-jp@eurofins.com

No SEQ1908011S